


CMFiX[®] Plate

プレート仮固定用ホールを3か所に配置
(Φ1.0 mm鋼線使用可能)

伸筋腱損傷を防止するよう
ラウンドエッジ加工処理

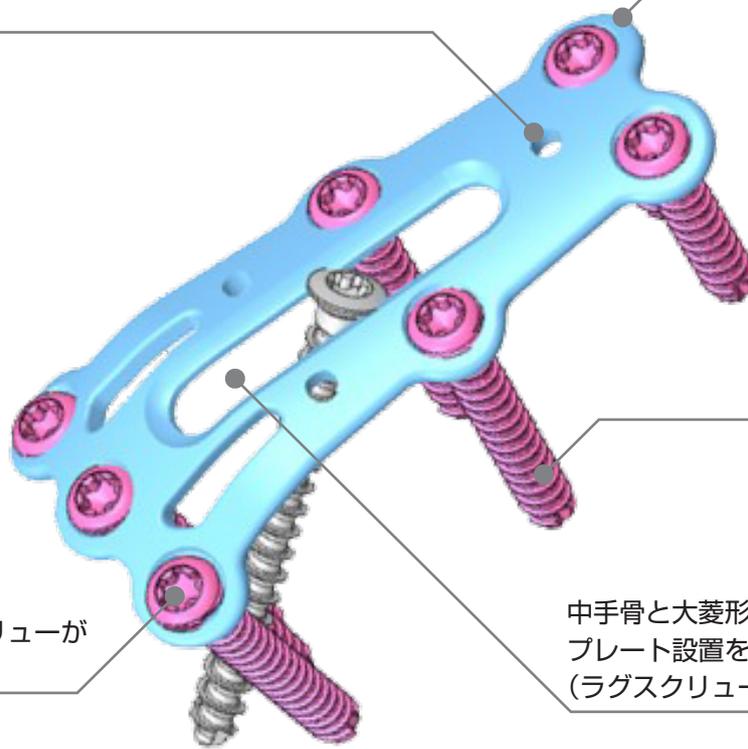


プレート折損防止目的で
遠位部は縦2列で強固な
固定が可能

大菱形骨にロッキングスクリューが
3本挿入可能

中手骨と大菱形骨をK鋼線で仮固定したまま
プレート設置を可能とした楕円ホール
(ラグスクリューホールとしても使用可能)

■ プレート断面

- ① プレート近位部は prebending (25°) されたアノミカル形状
- ② 中手骨にフィットするようにプレート断面はカーブ形状

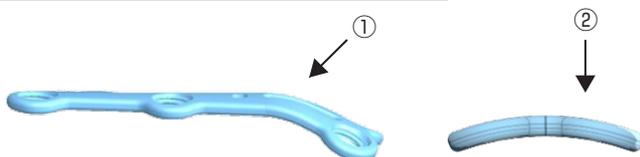

製品情報

製品番号	製品名
MHL-CMF1025	CMFiX® プレート 25°



製品番号	製品名
TLS2003 ~ TLS2023	ロッキングコーティカルスクリュー Φ 2.0mm × 3mm ~ 23mm

* 1mmピッチ



製品番号	製品名
TS2003 ~ TS2023	コーティカルスクリュー (ノンロック) Φ 2.0mm × 3mm ~ 23mm

* 1mmピッチ



【使用ドリル】

製品番号	製品名
HSD1627-ST	Φ 1.6mmソリッドドリル



販売名：マルチハンドロックシステム用スクリュードライバー
届出番号：08B1X00003000039

販売名：マルチハンドシステム手術器械セット
届出番号：08B1X00003000032

販売名：マルチハンドシステム単回使用整形外科用バー
認証番号：301AKBZX0005000

販売名：マルチハンドシステム 2.0 / 1.5
承認番号：30300BZX0094000

販売名：マルチハンドロックシステム
承認番号：30300BZX0094000


販売元
株式会社ステラ医療企画
 〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷 2-8-9
 ゼックスベルク 103 号室
 TEL.043-350-0320 FAX.043-350-0321
 その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。
<http://www.stellamed.co.jp>


製造販売元
株式会社ベアーメディック
 本社工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子 1361
 東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-24 湯島ベアービル
 TEL.03-3818-4041 (代) FAX.03-3818-4042
 その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。
<http://www.bearmedic.co.jp/>

